




Las balanzas de precisión Nimbus son de construcción durable y fácil operación. Con lecturas de 0.001g a 0,1 g, la Nimbus proporciona una experiencia optimizada de pesaje. Los modelos de olla pequeña de precisión tienen un tamaño compacto, por lo que la balanza ocupa un espacio mínimo pero conserva un alto nivel de rendimiento. Su construcción de metal sólido proporciona la durabilidad para soportar el riguroso uso diario y productos químicos. La eficiencia mecánica y electrónica mejorada proporciona lecturas consistentes y fiables. Las balanzas de precisión Nimbus con legibilidad 0.001g (1mg) tienen una protección de cristal redondo desmontable para ayudar a minimizar los efectos de movimiento de aire.

Precisión – Pesaje de precisión en una variedad de tamaños de platos
Plato amplio - Plato extra grande para artículos grandes y ensayos de materiales

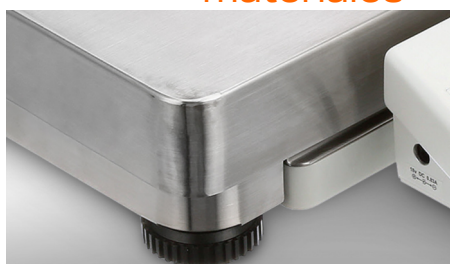

Características

- LCD vívido y retroiluminado fácilmente visible en cualquier condición de iluminación
- Teclas codificadas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
- El indicador de nivelación y las patas ajustables aseguran una configuración adecuada para resultados de pesaje óptimo
- Carcasa metálica robusta protege los componentes internos en ambientes hostiles
- Su teclado sellado protege contra la suciedad y los derrames accidentales
- Interfaz USB y RS-232 para comunicación con computadoras o impresoras
- Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
- Adaptador de CA incluido
- Calibración externa permite la verificación y el ajuste con masas
- Impresiones incluyen fecha, hora de los datos de seguimiento dentro de las directrices de Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL)
- Filtración digital seleccionable para controlar los efectos de las vibraciones y perturbaciones
- Característica zero-tracking garantiza la lectura en la pantalla vuelva a cero
- La pantalla multilingüe permite su uso en distintas regiones
- Compatible con Adam Connect para la transferencia inalámbrica de datos a impresoras y PCs
- Gancho opcional permite el pesaje debajo de la balanza
- Una garantía de 5-años garantiza la calidad durante años de uso.

Aplicaciones

- Pesaje
- Reduento de piezas
- Calculo de porcentaje
- Pesaje de Control
- Pesaje dinámico / de animales
- Determinación de la densidad

Adam es la respuesta.

Durante más de medio siglo, Adam ha sido la respuesta cuando la precisión es la prioridad. Las básculas y balanzas Adam ofrecen soluciones de precisión para profesionales de todos los sectores.

adamequipment.com

©2026 Adam Equipment

Detalles del producto

Modelo	NBL 12001e		NBL 22001e	NBL 32001e
Capacidad	12000g		22000g	32000g
Legibilidad			0.1g	
Tamaño del plato			300x400mm	
Unidades de Pesaje			g,kg,ct,GN,N,lb,oz,ozt,dwt,custom unit	
Tiempo de estabilización (seg)	2			3
Interfaz			RS-232	
Calibración			Calibración Externa	
Pantalla			Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 20mm de altot	
Fuente de alimentación			Adaptador 18VDC 50/60Hz 830mA Voltaje de entrada: 100-240V 50/60Hz 0.6A	
Carcasa			Base de aluminio extruido con una caja de aluminio fundido	
Dimensiones generales	400x470x100mm			401x470x102mm
Peso neto			7.5kg	

Accesorios

Número de artículo	Descripción
104008036	Mesa antivibración
3074010267	cable USB
3014011014	cable RS-232 frecuencia intermedia
1120014641	impresora de impacto AIP
600002028	Programa de recopilación de datos de AdamDU
700660290	Certificado de calibración
3014013041	cable de bloqueo de seguridad
1120015779	Impresora térmica ATP 2
302126013	Gancho de pesaje inferior para plato de 15,7"x11,8"/400x300 mm

Accesorios principales



Mesa antivibración

Nuestra mesa antivibraciones AVT ofrece una superficie estable y sólida para reducir las vibraciones al pesar con una balanza o báscula de alta precisión. Se suele utilizar junto con modelos de balanzas semimicro y analíticas.



Impresora térmica ATP 2

Contenido de la caja

- Modelos suministrados con
- Power adapter
 - Manual on CD
 - scale / balance

Facilitado por

Los logotipos van aquí